



soluzioni in movimento

**DEAMBULATORI
PER ADULTI
E BAMBINI**



Meywalk 2000



Miniwalk



Meywalk 4



meyland-smith
— mobility and more —

Meywalk 2000

pag. 6

*Il deambulatore versatile e flessibile,
adatto a tutte le età: dai 4 ai 100 anni*



Meywalk 4

pag. 8

Il deambulatore dinamico



Miniwalk

pag. 12

*Il deambulatore per bambini di età
compresa tra 1 anno e mezzo e 7 anni*



Miniwalk, Meywalk 2000, Meywalk 4

Nei casi in cui vi è un sufficiente controllo della parte superiore del corpo ma va favorita e stimolata la deambulazione, Medimec propone i deambulatori della linea Meyland-Smith. Questi innovativi deambulatori si distinguono sul mercato della tecnologia assistiva in quanto provvisti di sospensioni a molle, le quali hanno lo scopo di stimolare i muscoli dell'utente inducendo i movimenti tipici di un'andatura naturale. Durante il cammino il bacino effettua un movimento ondulatorio dall'alto verso il basso. Nella deambulazione assistita tramite un deambulatore Meyland-Smith il paziente prova una sensazione di sicurezza e stabilità che lo induce ed aiuta a riprodurre l'andamento naturale del corpo e delle anche. È stato inoltre osservato che il sistema di ammortizzatori molto spesso stimola la persona con disabilità mentali a muoversi, portandola ad avere più consapevolezza del proprio corpo. L'ampia gamma di regolazioni disponibili per questi deambulatori permette di personalizzarli in modo ottimale in base alle personali esigenze e caratteristiche fisiche di ciascun utente.



Per una maggior praticità e sicurezza i modelli Meywalk 2000 e Meywalk 4 sono provvisti di uno speciale **sistema di sollevamento della seduta** che permette alla seduta di abbassarsi al livello della carrozzina per agevolare il passaggio del paziente sul deambulatore, limitando al minimo gli sforzi da parte dell'assistente. Basta premere il pulsante di bloccaggio posto nella parte anteriore e alzare la barra. La seduta si abbassa. Quando l'utente si è sistemato la seduta si rialza spingendo la barra verso il basso fino al blocco totale, con un click (serve solo un terzo del peso dell'utente per abbassare la barra).

Meywalk 2000

Il deambulatore versatile e flessibile, adatto a tutte le età: dai 4 ai 100 anni



Meywalk 2000 in posizione normale



Meywalk 2000 con seduta sollevata per l'accesso al deambulatore

Misura	Utente
SMALL	per bambini dai 4 ai 7 anni
MEDIUM	per bambini dai 5 ai 14 anni
LARGE	per adulti dai 14 anni

Disponibile in tre misure, **Large**, **Medium** e **Small**, il deambulatore Meywalk 2000 è regolabile nell'altezza della seduta e del supporto toracico, per adattarsi all'evoluzione delle più svariate esigenze.

L'**impugnatura anteriore** può essere regolata in inclinazione per assicurare una posizione confortevole e bilanciata.

L'**anello toracico** e la **seduta** di Meywalk 2000 sostengono l'utente e lo aiutano a tenere la posizione eretta.

Entrambi sono regolabili in altezza indipendentemente l'uno dall'altro. Tale regolazione è lineare, consente cioè di adattarsi a qualsiasi variazione di statura o necessità, in questo modo il deambulatore può essere facilmente personalizzato in base alle esigenze dell'utilizzatore.

L'**anello toracico** è disponibile in cinque misure in base alla circonferenza toracica:

- fino a 70 cm
- fino a 90 cm
- fino a 105 cm
- fino a 120 cm
- fino a 130 cm

e può essere scelto in tre varianti:

- rialzato nella parte anteriore, per coloro che necessitano di maggior sostegno del torace
- piatto, per coloro che hanno un buon controllo del tronco
- curvo verso il basso, ideale per le donne



Anello toracico, nella variante rialzata nella parte anteriore

CARATTERISTICHE

- Disponibile in tre misure: Large, Medium e Small
- Favorisce un andamento più naturale e corretto del corpo grazie alle sospensioni a molle
- Sistema di sollevamento della seduta che agevola l'accessibilità da parte dell'utente
- Per uso sia interno che esterno

Meywalk 2000 è provvisto di **sospensioni a molle** che riproducono il naturale movimento ondulatorio del corpo durante il cammino, al fine di stimolare e favorire la deambulazione.

Le molle sono disponibili in quattro dimensioni in base al peso dell'utente e riconoscibili dal colore:

- Da 20 a 45 Kg = molle bianche
- Da 45 a 65 Kg = molle gialle
- Da 65 a 80 Kg = molle blu
- Da 80 Kg = molle rosse



*Molle nella misura
da 45 a 65 Kg*



Meywalk 2000 nelle misure Medium, Large e Small

Meywalk 2000

DATI TECNICI

	Small	Medium	Large
Regolazione altezza seduta	44-66 cm	62-86 cm	76-100 cm
Regolazione altezza anello toracico	81-100 cm	93-117 cm	108-131 cm
Lunghezza	85 cm	95 cm	95 cm
Larghezza	68 cm	68 cm	68 cm
Diametro ruote anteriori	150 mm	200 mm	200 mm
Diametro ruote posteriori	400 mm	400 mm	400 mm
Peso	22 kg	25 kg	26 kg
Portata massima	100 kg	100 kg	100 kg
Colore disponibile	Verde	Blu	Blu

RICONDUCEBILITÀ CODICI ISO 03.78.09.003, 03.48.21.201, 03.48.21.204, 03.48.21.207

La **struttura** è realizzata in acciaio trattato con polvere epossidica.

I **componenti** e gli **accessori** sono cromati neri/elettrozincati.

Le **ruote** anteriori e posteriori sono in gomma piena antiforatura, sia per uso interno che esterno.

Meywalk® 2000 è **certificato CE** e soddisfa le norme in vigore.



Vista posteriore del Meywalk 2000

ACCESSORI

DI SERIE OPZIONALI

Impugnatura anteriore	Ruote anti-ribaltamento
Anello toracico (misura a scelta)	Dispositivo anti-retromarcia
Freno posteriore	Supporti per anche
Seduta	Divisorio per gambe
Ruote anteriori piroettanti	Guide esterne per piedi
	Regolazione della resistenza sui freni posteriori
	Blocco direzionale per ruote anteriori

I deambulatori distribuiti da Medimec promuovono la socializzazione e contribuiscono ad aumentare la qualità della vita.



Meywalk 2000 misura S

Meywalk 4

Il deambulatore dinamico

Meywalk® 4 è il deambulatore indicato per diversi tipi di disabilità, in particolare per coloro che hanno bisogno della carrozzina e che necessitano di un ausilio o supporto per stare in piedi e camminare. Meywalk® 4 rappresenta la quarta generazione della famosa linea di prodotti Meywalk® di Meyland-Smith, che viene ora presentata con nuove ed importanti funzioni.



Meywalk 4 vista laterale, seduta ed anello toracico inclinati

L'innovazione di Meywalk® 4 è costituita dalla **seduta dinamica**, unica nel suo genere, che segue i movimenti dell'utilizzatore. L'appoggio, oscillante, permette la rotazione dell'anca durante il movimento. Quando l'utente cammina la seduta segue i movimenti laterali delle anche e viene riportato alla posizione iniziale durante tutte le varie fasi dell'andatura in modo delicato e sicuro.

La seduta dinamica e il supporto toracico imbottito sostengono l'utente e lo aiutano a mantenere la posizione eretta.

È inoltre possibile adattare **l'inclinazione della seduta e dell'anello toracico** per agevolare eventuali cambiamenti di posizione, da verticale a leggermente avanzata, oltre che per agevolare il movimento.

Come per Meywalk® 2000 entrare ed uscire da Meywalk® 4 è molto semplice, grazie alla barra ribaltabile incorporata che abbassa e solleva la seduta e il supporto toracico quando l'utente entra ed esce dal deambulatore.

L'anello toracico è disponibile in cinque misure in base alla circonferenza toracica:

- 70 cm
- 90 cm
- 105 cm
- 120 cm
- 130 cm

e può essere scelto in tre varianti:

- rialzato nella parte anteriore, per coloro che necessitano di maggior sostegno del torace
- piatto, per coloro che hanno un buon controllo del tronco
- curvo verso il basso, ideale per le donne



Anello toracico




Barra per l'abbassamento della seduta

CARATTERISTICHE

- **La seduta oscillante stimola maggiormente il movimento**
- **Freni, di retromarcia e di resistenza, di serie**
- **Anello toracico e seduta regolabili in inclinazione ed altezza**
- **Maniglione anteriore e anello toracico in poliuretano: confortevole, resistente e facile da pulire**
- **Sistema di sollevamento della seduta che agevola l'accessibilità da parte dell'utente**
- **Per uso sia interno che esterno**
- **Disponibile in due misure: Medium e Large**

Meywalk 4 è provvisto di **sospensioni a molle** che riproducono il naturale "oscillamento" del corpo durante il cammino, al fine di stimolare e favorire la deambulazione. Le molle sono disponibili in quattro dimensioni in base al peso dell'utente e riconoscibili dal colore:

- Min. 20 kg = molle bianche
- Min. 45 kg = molle gialle
- Min. 65 kg = molle blu
- Min. 80 kg = molle rosse

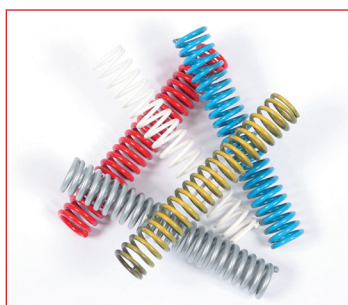

Meywalk® 4 è disponibile in **due misure, Medium e Large**, e può essere regolato per adattarsi alle più svariate esigenze e corporature. Tutte le **regolazioni** vengono eseguite con facilità senza bisogno di strumenti, rendendo semplice e veloce l'utilizzo del deambulatore.



Due modelli Meywalk 4 nelle misure Large e Medium

Meywalk4

DATI TECNICI

	Medium	Large
Regolazione altezza seduta	62-87 cm*	83-106 cm*
Regolazione altezza anello toracico	100-133 cm	119-151 cm
Lunghezza	93 cm	96 cm
Larghezza esterna	62 cm	66 cm
Larghezza di accesso (larghezza interna)	48 cm	53 cm
Dimensioni ruote anteriori	200 mm	200 mm
Dimensioni ruote posteriori	275 mm	275 mm
Portata massima	130 kg	130 kg
Peso	32 kg	34 kg
Colore	rosso metallizzato	nero metallizzato

*Misura riferita alla configurazione con seduta oscillante; con la seduta classica, tutte le misure sono ridotte di 2 cm.

RICONDUCEBILITÀ PARZIALE CODICI ISO 03.78.09.003, 03.48.21.201, 03.48.21.204, 03.48.21.207

La **struttura** è in acciaio trattato con polvere epossidica. Le **ruote** anteriori e posteriori, in gomma piena antifuoristrada, sono utilizzabili sia all'interno che all'esterno. L'**anello toracico** e l'**impugnatura** anteriore sono in ac-

ciaio rivestito con poliuretano espanso idrorepellente, per assicurare lunga durata, facile manutenzione e massima igiene.

Meywalk® 4 è **certificato CE** e soddisfa le norme in vigore.



Anello toracico aperto



Schienale sollevato



Anello toracico chiuso




Schienale chiuso

ACCESSORI

DI SERIE OPZIONALI

Seduta oscillante	Ruote anti-ribaltamento
Impugnatura anteriore	Supporti per anche, con cuscinetto di appoggio frontale
Anello toracico (misura a scelta)	Cuscinetto di appoggio frontale
Freno posteriore multifunzione (dispositivo antiretromarcia e regolazione della resistenza sui freni posteriori)	Seduta classica
Ruote anteriori piroettanti	Divisorio per gambe
	Guide esterne per piedi
	Blocco direzionale per ruote anteriori

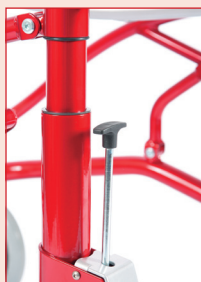

Freno posteriore



Dispositivo anti-retromarcia



Seduta oscillante



Divisorio per gambe



Ruota anti-ribaltamento



Meywalk 4 vista laterale: seduta con schienale sollevato, impugnatura, anello toracico

Miniwalk

Il deambulatore per bambini di età compresa tra 1 anno e mezzo e 7 anni

L'esplorazione dell'ambiente circostante è un'attività fondamentale per lo sviluppo del bambino. Per i bambini che non possono muoversi autonomamente lo strumento ideale per stimolarli in questo tipo di attività è il deambulatore Miniwalk.

Con un ampio range di regolazioni Miniwalk è adattabile alle diverse fasi della crescita. Disponibile in **due misure**, può essere utilizzato per bambini di età compresa tra 1 anno e mezzo e 7 anni.



Miniwalk vista laterale

Il **supporto toracico** e la **seduta** sostengono il bambino e lo aiutano a tenere la posizione eretta.

Entrambi sono regolabili nell'altezza indipendentemente l'uno dall'altro. Tale regolazione è lineare, consente cioè di adattarsi a qualsiasi variazione di statura o necessità, in questo modo il deambulatore è in grado di accompagnare il bambino nella sua crescita.

L'**anello toracico** è disponibile in due misure in base alla circonferenza toracica:

- fino a 70 cm di circonferenza
- fino a 90 cm di circonferenza


e in due varianti in base alle esigenze:

- rialzato nella parte anteriore, per bambini che necessitano di maggior sostegno del torace
- piatto, per bambini che hanno un buon controllo del tronco

Anche Miniwalk, come gli altri deambulatori distribuiti da Medimec, è provvisto inoltre di sospensioni a molle che permettono al deambulatore di reagire ai movimenti, i muscoli del bambino vengono così stimolati favorendone lo sviluppo.

Le molle sono disponibili in tre versioni a seconda del peso del bambino e riconoscibili in base al colore:

- Da 10 a 15 kg = molle verdi
- Da 15 a 20 kg = molle argento
- Da 20 kg = molle nere

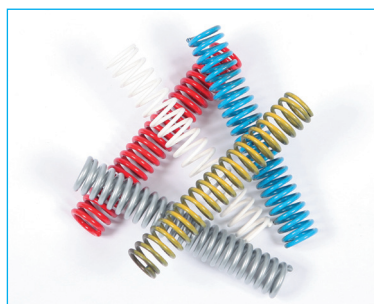

Seduta



Anello toracico

CARATTERISTICHE

- Disponibile in due misure: 1 e 2
- Favorisce un andamento più naturale e corretto del corpo grazie alle sospensioni a molle
- Per uso sia interno che esterno
- Supporto toracico e seduta regolabili in altezza
- Impugnatura regolabile nell'inclinazione

DATI TECNICI

	Misura 1	Misura 2
Regolazione altezza seduta	31-49 cm	31-64 cm
Regolazione altezza anello toracico	56-73 cm	71-88 cm
Lunghezza	74 cm	74 cm
Larghezza	65 cm	65 cm
Carico massimo	40 kg	40 kg
Peso	15 kg	15 kg
Colore	Turchese	Turchese

RICONDUCEBILITÀ CODICI ISO 03.48.21.081, 03.48.21.201, 03.48.21.204, 03.48.21.207

La **struttura** è resistente e leggera, realizzata in acciaio trattato con polveri epossidiche e galvanizzazione elettrica. Le **ruote** sono in gomma piena antiforatura, quelle anteriori sono orientabili mentre quelle posteriori sono fisse (con freno).

L'**anello toracico** e l'**impugnatura anteriore** sono in acciaio rivestito con un'imbottitura morbida ed idrorepellente.

Miniwalk® è **certificato CE** e soddisfa le norme in vigore.

ACCESSORI

DI SERIE	OPZIONALI
Impugnatura anteriore	Ruote anti-ribaltamento
Anello toracico (misura a scelta)	Dispositivo anti-retromarcia
Freno posteriore	Supporti per anche
Seduta	Divisorio per gambe
Ruote anteriori piroettanti	Guide esterne per piedi
	Regolazione della resistenza sui freni posteriori






Medimec® International srl
Via Proventa, 52 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546/46870 - Fax 0546/46467
P. IVA 02259030399
medimec@medimec.it | www.medimec.it

Deambulatori Meyland-Smith®: scheda di rilevamento misure

come prendere le misure


PASSO 1: altezza dell'inguine

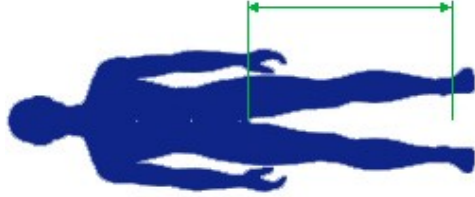

Determinare l'altezza dall'inguine a terra, per impostare la relativa altezza della seduta.

Nel caso in cui l'utente sia seduto in carrozzina consigliamo di utilizzare un metro flessibile e rilevare due misure: bacino-ginocchio, ginocchio-tallone.

PASSO 2: circonferenza toracica

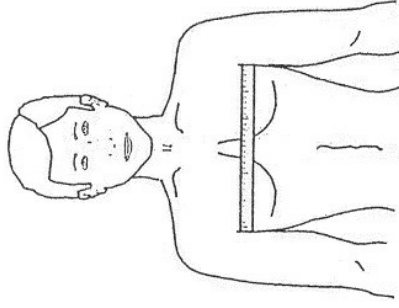

Utilizzando un metro flessibile, prendere la circonferenza del torace posizionandolo sotto le braccia (come da figura).

Nota:
La misura indicata corrisponderà alla circonferenza interna dell'anello toracico

PASSO 3: peso



Nota:
Il peso rilevato determina la scelta del tipo molla

come effettuare le regolazioni

- 1 Regolare l'altezza dell'anello toracico
- 2 Regolare l'altezza della seduta
- 3 Regolare la profondità della seduta
- 4 Regolare l'inclinazione dell'impugnatura anteriore

info ordine

Data ordine: _____

Nome: _____

Cognome: _____

Rif. operatore: _____

scrivi qui le misure rilevate


Cm

Cm

Kg

	Miniwalk Mis. 1	Miniwalk Mis. 2	Meywalk 2000 Small	Meywalk 2000 Medium	Meywalk 2000 Large	Meywalk 4 Medium	Meywalk 4 Large
Altezza sella (senza carico)	31 - 49 cm	31 - 64 cm	48 - 66 cm	62 - 86 cm	76 - 100 cm	62 - 87 cm	83 - 106 cm
Portata massima	40 kg	40 kg	100 kg	100 kg	100 kg	130 kg	130 kg
Molla (colore)							
da 10 a 15 kg (verde)	X	X	-	-	-	-	-
da 15 a 20 kg (argento)	X	X	-	-	-	-	-
da 20 a 45 kg (nero)	X	X	-	-	-	-	-
da 20 a 45 kg (bianco)	-	-	X	X	X	X	X
da 45 a 65 kg (giallo)	-	-	X	X	X	X	X
da 65 a 80 kg (blu)	-	-	X	X	X	X	X
da 80 kg in su (rosso)	-	-	X	X	X	X	X
Anello forattico (circ. interna)							
70 cm	X	X	X	-	-	X	X
90 cm	X	X	X	X	X	X	X
105 cm	-	-	X	X	X	X	X
120 cm	-	-	-	X	X	X	X
130 cm	-	-	-	X	X	X	X

Rivenditore autorizzato:

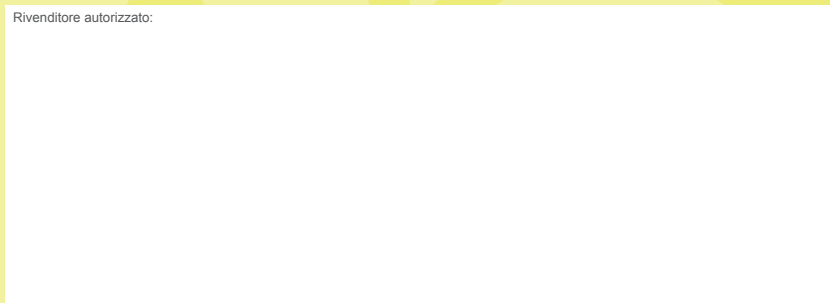

Medimec[®]

soluzioni in movimento

Importatore

meyland-smith
— mobility and more —

MEDIMEC[®] international s.r.l.
Divisione attrezzature ospedaliere
Via Proventa, 52 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 46870 - Fax 0546 46467

medimec@medimec.it www.medimec.it