

SICUREZZA NELLA VITA A CASA



Regia



**Il letto di cura personalizzabile
con molte opzioni**

Edizione internazionale

STIEGELMEYERGROUP



BURMEIER

Regia – il letto ortopedico che assicura protezione e comfort facendoti sentire a casa

Quando una persona necessita di cure a domicilio, il letto diventa un punto centrale del vivere quotidiano. Dormire, pranzare, guardare la televisione, chiacchierare - il letto è il luogo in cui avvengono tutte queste attività quando lo stato di salute impedisce all'utente di alzarsi. Il letto dovrebbe quindi assicurare un'atmosfera sicura, confortevole e accogliente, promuovere la mobilità della persona e alleviare gli sforzi dei caregiver. Il nostro letto Regia, con l'innovativo sistema Easy Switch, soddisfa tali esigenze.

Il Regia è studiato per coloro che cercano un letto ortopedico che offre varie opzioni di design e supporto tecnologico moderno. Permettendo un'ampia regolazione dell'altezza, favorisce la prevenzione dalle cadute e, allo stesso tempo, protegge la schiena

del caregiver. La sponda laterale telescopica divisa offre un bilanciamento ideale tra protezione e libertà della persona. Grazie al sistema Easy Switch, la sponda può essere montata e rimossa in pochi secondi. Questo permette al letto di adattarsi facilmente al variare delle necessità e delle condizioni cliniche dell'utente. Con il Regia Partner, letto matrimoniale, le coppie possono godersi nuovamente la compagnia reciproca.

Il Regia permette di scegliere varie imbottiture per testata, pediera e sponde, in tessuto o in finta pelle, e una ampia selezione di legni eleganti che trasformano il letto in un oggetto di design che soddisfa tutti i gusti.

Copertina: Regia con testata Primus e pediera Primus-Low in color Havana Cherry.



- **Ampio range di regolazione in altezza:**
26 – 80 cm
- **Portata massima:**
225 kg
- **Personalizzabile:**
 - Larghezza della rete 90 o 100 cm
 - Sponde di sicurezza telescopiche e divise per una protezione flessibile
 - Sistema Easy Switch per montaggio rapido e senza strumenti delle sponde, della testata, della pediera e dei pannelli



Tessuti brillanti

Testata e pediera sono disponibili con imbottiture e tessuti accattivanti. Quando le sponde laterali di sicurezza non sono necessarie, si possono applicare pannelli di legno, tessuto o finta pelle. In questo modo, il letto si adatta al design della stanza.

Contenuti

2 Introduzione

4 Regia

5 Regia partner

7 Sponde

8 Il sistema Easy Switch

10 Regolazione dell'altezza

11 Funzioni per il comfort

13 Il sistema di guida a 24 V

15 Materassi

16 Accessori

18 Dati tecnici

19 Il gruppo Stiegmeyer



Elegante finta pelle

Se il Regia viene dotato di pannelli, testata e pediera in finta pelle, non assomiglia più a un letto ortopedico. L'utente tuttavia continua a usufruire di tutti i vantaggi di un letto a comando elettrico regolabile in altezza. Le sponde di sicurezza e tutti gli altri elementi possono essere integrati in qualsiasi momento. Ciò fa sì che il letto possa essere sempre modificato per meglio rispondere alle esigenze personali.



Regia partner letto matrimoniale

- **Letto flessibile per coppie anziane:**
 - reti singole regolabili individualmente
 - posizione seduta confortevole
 - le due metà del letto possono essere facilmente separate e riunite
 - design accattivante




L'elegante letto ortopedico Regia può essere adattato per incontrare qualsiasi esigenza di comfort e protezione.

Regia

Un letto che soddisfa ogni esigenza

Un letto di cura con il massimo grado di comfort e sicurezza, che favorisce la **mobilità** del residente, agevola il lavoro dei caregiver e offre diverse opzioni di configurazione - ecco il modello Regia in sintesi. Con questo modello, i clienti privati e le più esigenti RSA potranno godere di un letto flessibile, in grado di soddisfare i requisiti più severi.

Regia è un **letto basso** con ampio range di regolazione in altezza - da 26 a 80 cm - e protezioni laterali divise opzionali, che protegge il residente dal pericolo di caduta, senza limitare la libertà di movimento. Questo modello si ispira alla filosofia dei progetti **Werdenfelser Weg**, a favore di una riduzione dei sistemi di contenzione dei pazienti.

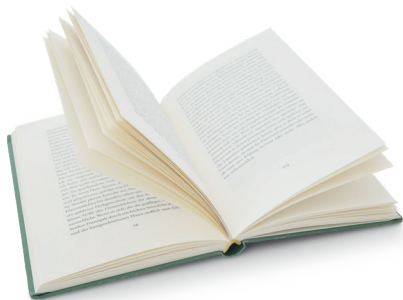


Caratteristiche particolari:

Letto basso	Range di altezza molto ampio da 26 a 80 cm	Portata massima alta 225 kg	Estensione della lunghezza	Manovrabilità	Sistema 24 volt	Posizione anti-Trendelenburg	Ingegneria tedesca	Easy Switch	Werdenfelser Weg

Importanti vantaggi

- L'altezza regolabile fino ad 80 cm permette di rendere più ergonomica la posizione del caregiver durante l'assistenza.
- La portata di 225 kg fa sì che possa essere utilizzato anche da utenti molto pesanti.
- Possibilità di aumentare la larghezza della rete (100 cm) e la lunghezza del letto tramite una estensione di 20 cm.
- Rete elettrica metallica in 4 sezioni regolabile con possibilità di sollevare le gambe.
- Comando manuale con blocco selettivo.

Dimensioni esterne/range di regolazione dell'altezza:

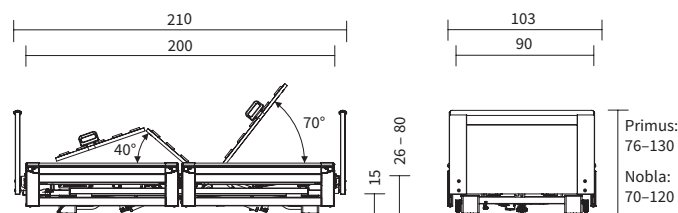



Eleganti imbottiture o accattivanti decori in legno, pannelli laterali o sponde di sicurezza - con il Regia Partner letto matrimoniale le coppie sono viziato per scelta.

Regia partner

Il letto matrimoniale per vivere una vita piena ogni giorno

L'aumentare dell'instabilità e il crescente bisogno di cure dovuti all'età presentano diverse sfide per le coppie. Una di queste è la condivisione del letto. Spesso, uno dei partner deve spostarsi in un letto ortopedico mentre l'altro rimane da solo nel letto matrimoniale. Come risultato, la familiarità e l'intimità della relazione ne soffrono. Il nostro Regia Partner offre una soluzione ideale in questi casi.


Il Regia Partner combina le caratteristiche e il comfort di un letto singolo con funzioni di sicurezza specificamente disegnate per le coppie. Allo stesso tempo, le due metà del letto possono essere facilmente separate e riunite se si rende necessario effettuare assistenza da entrambi i lati o se i due partner desiderano dormire in stanze separate per un periodo di tempo.

Importanti vantaggi

- Ampio range di regolazione dell'altezza da 26 a 80 cm.
- Due reti da 90 x 200 cm ciascuna.
- Portata massima di 225 kg per ogni rete.
- Regolazione in altezza e posizione anti-Trendelenburg dei due letti sono sempre sincronizzati, per ridurre al minimo il pericolo di incastro.
- La posizione di pannelli, testata e pediera può essere adattata facilmente grazie al sistema Easy Switch.



Dimensioni esterne/range di regolazione dell'altezza:

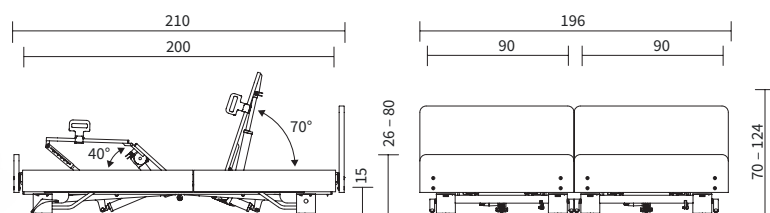

Caratteristiche particolari:





- ▲ La possibilità di separare facilmente le due metà del letto permette di effettuare l'assistenza da entrambi i lati e rende più agevole la pulizia della stanza

Comfort e sicurezza per le coppie

Il Regia Partner assicura a entrambi gli utenti comfort e protezione e agevola il lavoro dei caregiver. Lo schienale e la sezione gambe possono essere regolati in modo indipendente, cosicché una persona può leggere, ad esempio, mentre l'altra riposa. A tale scopo, ogni metà del letto è provvista di un proprio comando.

La struttura del letto, invece, si muove sempre in modo sincronizzato quando si regola l'altezza da 26 a 80 cm e si imposta la posizione anti-Trendelemburg. Questo meccanismo evita che gli utenti vengano intrappolati nell'apertura che si creerebbe tra i due materassi. Le sponde divise a metà sono sempre disponibili come accessorio.



- ▲ Ogni metà del letto è provvista di un comando manuale.

SICUREZZA NELLA VITA A CASA

Posizione seduta

I letti ortopedici elettrici matrimoniali sono spesso poco più che singoli letti posizionati l'uno vicino all'altro e con funzionalità limitate. Il Regia Partner inclinabile è molto apprezzato per la sua posizione seduta. Essa facilita la respirazione, permette di alimentarsi direttamente da letto e facilita la socializzazione portando lo sguardo dell'utente alla stessa altezza di quello degli interlocutori.



- ▲ Mentre la struttura del letto si muove sempre in modo sincrono, le reti possono essere regolate individualmente. Ciò consente, per esempio, una posizione seduta confortevole.



▲ Alzare le sponde di sicurezza verso la testata fino al secondo step costituisce un compromesso ideale tra libertà e protezione a norma.



▲ La sponda telescopica (TSG) verso la testata, se alzata solo fino al primo step, funge da guida e facilita l'utente nella salita e nella discesa dal letto senza assistenza.



▲ Alzare le sponde in senso diagonale conferisce all'utente una rassicurante sensazione di sicurezza.



▲ La sicurezza degli utenti a rischio di caduta è assicurata dalle sponde completamente rialzate.

Sponde di sicurezza moderne

Le sponde telescopiche di sicurezza divise (TSG) di Regia sono facili da rialzare senza nessuno sforzo. Se si alza soltanto la metà verso la testata, all'utente rimane ampio spazio per salire e scendere dal letto. Eventualmente, si può equipaggiare il letto con le sole sponde verso la testata che, con una lunghezza di 110 cm, garantiscono una protezione standard conforme.

Le sponde telescopiche di sicurezza (TSG) sono facili da regolare in due step. Alzate fino al primo livello, offrono una guida all'utente e sono talmente discrete da permettere allo sguardo di spaziare senza impedimenti. Il secondo livello fornisce una protezione completa. Per una rassicurante sensazione di supporto e sicurezza, può essere d'aiuto anche disporre le sponde in una posizione diagonale. Tutti gli elementi delle sponde telescopiche di sicurezza (TSG), così come i pannelli laterali, la testata e la pediera, possono essere montati e rimossi con l'innovativo Easy Switch. In questo modo, il Regia si adatta a qualsiasi esigenza e promuove la mobilità della persona assistita.

La sponda di sicurezza a tutta lunghezza (DSG) opzionale è raccomandata per gli utenti ad alto rischio di caduta e che utilizzano materassi anti-decubito. Anche essa è facile da installare e rimuovere grazie al sistema Easy Click.



▲ Le sponde di sicurezza a tutta lunghezza (DSG) opzionali possono essere installate in pochi secondi utilizzando il sistema Easy Click.




▲ Con le sponde di sicurezza a tutta lunghezza, gli utenti a rischio di caduta ottengono la massima protezione (immagine esemplificativa)

Easy Switch

Il sistema brevettato per letti ortopedici che rispetta gli standard di sicurezza

Scegli il Regia con le sponde telescopiche divise o senza sponde e beneficerai del nostro sistema Easy Switch. Il principio di Easy Switch è tanto semplice quanto interessante: le sponde, la testata e la pediera, così come i pannelli laterali possono essere installati e rimossi senza utilizzare nessuno strumento. Ciò è reso possibile dai ganci easy-to-use che si chiudono a scatto con un meccanismo di sicurezza che fa sì che essi non possano essere aperti dall'utente accidentalmente. Testate e pediere della serie Nobla ed i pannelli sono disponibili come accessorio con un'accattivante imbottitura in tessuto o finta pelle.

Grazie al sistema Easy Switch, il Regia può essere in qualsiasi momento allestito con sponde di sicurezza o rinnovato nel look ed adattato alle tue esigenze. Diventa così un letto che evolve con te e ti supporta in ogni fase della tua vita. Le sponde di sicurezza rimovibili possono essere rapidamente sostituite per rispondere a qualsiasi esigenza assistenziale, oltre a rendere molto più semplice l'assemblaggio del letto.

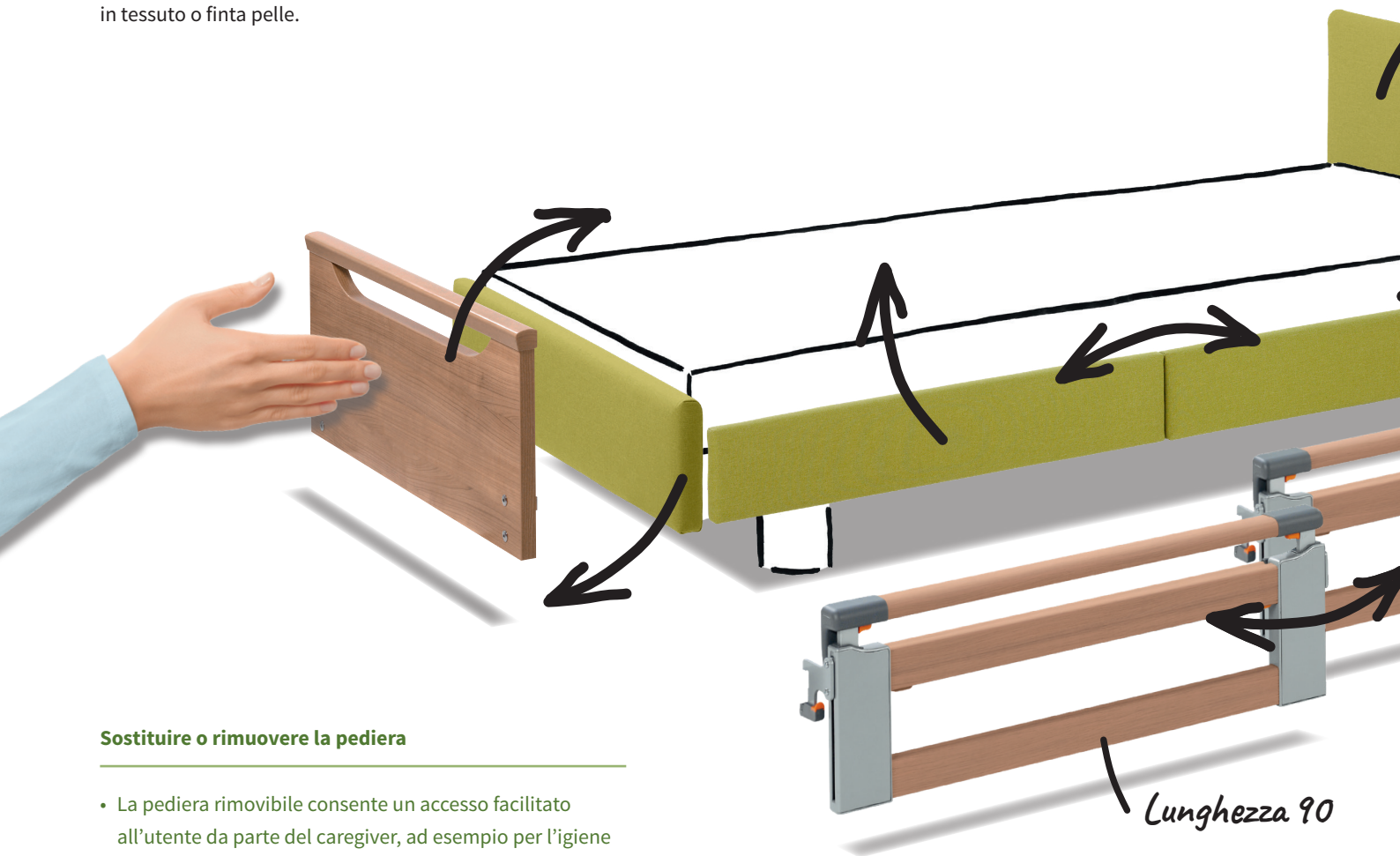

Sostituire o rimuovere la pediera


- La pediera rimovibile consente un accesso facilitato all'utente da parte del caregiver, ad esempio per l'igiene dei piedi.
- È possibile scegliere tra una pediera alta, che conferisce una sensazione di sicurezza, o una bassa, per una vista sulla stanza priva di ostacoli.
- Accattivanti decori in legno, tessuto o finta pelle.

! Le sponde di sicurezza possono essere combinate liberamente:
• 110/90 oppure 90/110

Design modulare per assemblaggio senza strumenti

Sostituire la testata in pochi secondi in ogni momento

- Design diversi per ogni stile della stanza.
- Accattivanti decori in legno, tessuto o finta pelle tra cui scegliere.
- Testata, pediera e pannelli laterali possono essere combinati a piacere.

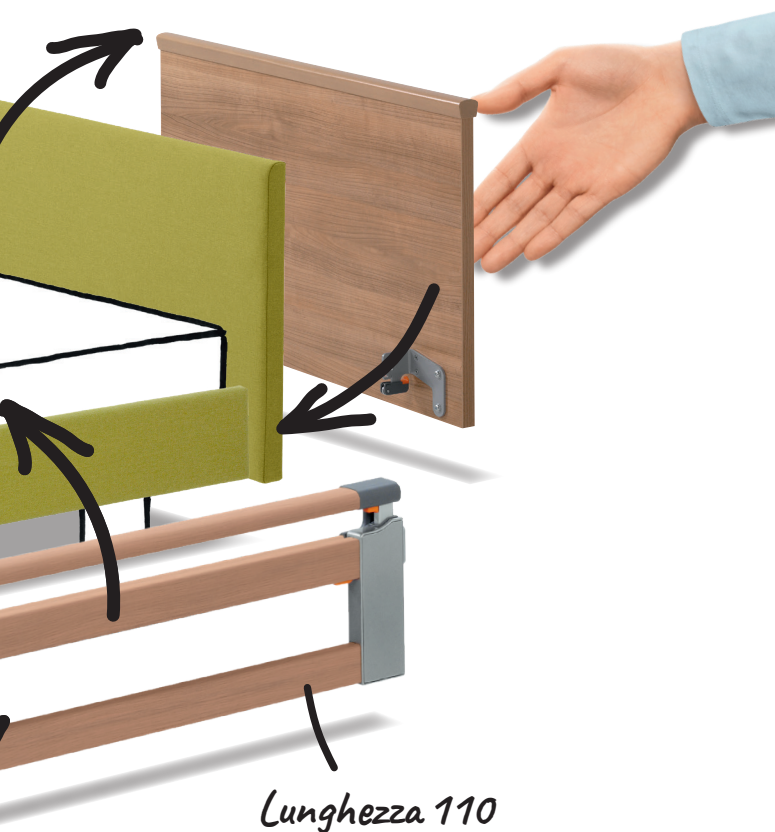

Monta o rimuovi le sponde di sicurezza divise quando vuoi

- Sponde da 90 e 110 cm possono essere liberamente combinate o utilizzate separatamente.
- L'utilizzo della sola sponda da 110 cm dal lato verso la testata fornisce una protezione che rispetta gli standard di sicurezza.
- L'utilizzo della sola sponda da 90 cm dal lato verso la testata rassicura e guida l'utente, lasciando ampio spazio per la salita e la discesa dal letto.

VIVERE IN SICUREZZA A CASA

Easy Switch per maggiore flessibilità e sicurezza


I letti con Easy Switch si adattano ai differenti gradi di protezione necessari all'utente e possono essere personalizzati per accontentare ogni preferenza. La flessibilità delle sponde laterali fornisce una protezione che rispetta gli standard di sicurezza senza limitare la libertà di movimento della persona che necessita di cure.



▲ Tutti gli elementi del sistema Easy Switch sono inseriti nella struttura del letto e installati tramite ganci easy-to-use.



▲ Si deve semplicemente premere il gancio verso l'alto.

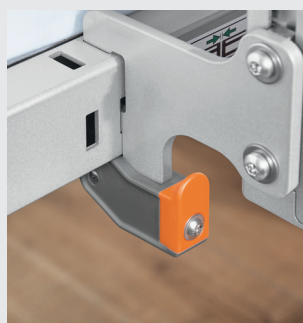

▲ Il gancio si chiude a scatto e l'elemento risulta installato.



▲ Per sganciare il meccanismo, tirare la levetta arancione e premere il gancio verso il basso.





La posizione più bassa, a soli 26 cm da terra, previene i traumi da caduta.

Sempre alla giusta altezza



▲ Lo stop intermedio a circa 40 cm è ideale per molte persone per favorire salita e discesa dal letto.



▲ L'altezza fino a 80 cm rende ergonomica la posizione del caregiver durante l'assistenza

I letti ad altezza ridotta giocano un ruolo importante nella prevenzione dei traumi dovuti a cadute. Dalla posizione vicina a terra, il rischio per il paziente è minimo, anche quando le sponde di sicurezza non sono alzate. Nel rispetto della filosofia del Werdenfelser Weg, che tende a ridurre al minimo le misure di contenimento (DoLS).

Col suo ampio range di regolazione dell'altezza da 26 a 80 cm, il Regia soddisfa tutte le esigenze del settore assistenziale. La posizione più bassa offre all'utente la protezione ottimale a letto. Il comando manuale consente una regolazione semplice e intuitiva. Con la funzione 3-stop function, il letto si ferma automaticamente a una posizione intermedia di circa 40 cm, l'altezza ideale per la salita e la discesa dal letto. Portato alla massima altezza di 80 cm, il Regia permette al caregiver di lavorare in modo ergonomico all'altezza delle anche.

Vantaggi importanti

- Ampio range di regolazione in altezza da 26 a 80 cm.
- Regolazione in continuo con comando manuale semplice e intuitivo.
- Il letto ad altezza ridotta promuove la prevenzione delle cadute senza utilizzare contenitori che limitano la libertà.
- L'altezza massima protegge la schiena e la salute degli assistenti e dei familiari.
- L'altezza ideale per salita e discesa dal letto promuove la mobilità dell'utente.



In posizione seduta, l'utente può partecipare alla vita quotidiana portando il proprio sguardo a livello degli altri.

Comfort

Goditi la vita quotidiana con vitalità

Il Regia, con le sue opzioni di regolazione, permette all'utente di partecipare alla vita di tutti i giorni insieme alla famiglia. Utilizzando il comando, il letto può essere regolato in una posizione anti-Trendelemburg fino a 15°. Se combinata allo schienale rialzato, che può essere regolato fino a 70°, tale impostazione permette di raggiungere una posizione seduta confortevole. Le persone che necessitano di assistenza possono assumere la postura seduta senza nessuno sforzo. In questa posizione, l'utente può vivere a pieno una conversazione con qualcuno o una serata davanti alla televisione.

Anche mangiare diventa molto più semplice in posizione seduta. Allo stesso tempo, il rischio di aspirazione diminuisce.

Il supporto per gli arti inferiori può risalire fino alla posizione orizzontale con l'aiuto del comando se per ragioni di salute è consigliabile la posizione seduta con le gambe di stese (long-sitting).



VIVERE IN SICUREZZA A CASA

Regia movo

Quando le persone non possono più alzarsi spesso dal proprio letto, un letto mobile rende la vita di ogni giorno più semplice. Il Regia Movo non richiede sforzi per essere mobilizzato ed è facile da manovrare nelle varie stanze della casa.

- Doppie ruote da 100 mm per una facile manovrabilità
- Le ruote direzionali facilitano la guida
- Altezza regolabile da 28 a 83 cm
- Freno centralizzato (standard in tutta la linea Regia)




Il Regia protegge dalle cadute senza limitare
la libertà e il comfort dell'utente.



- ◀ L'unità di erogazione energetica SwitchMode fornisce una corrente a bassa tensione a 24 V direttamente dalla presa.

VIVERE IN SICUREZZA A CASA

Risparmio energetico

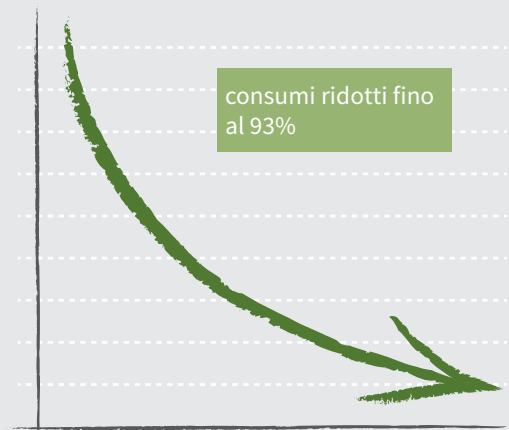

* comparata ai sistemi a 230 V, considerando 5 regolazioni al giorno

24 V Drive System


Il 24 V Drive System di Burmeier fornisce uno standard di sicurezza ideale per la cura delle persone a domicilio. Tutti i componenti a 230 V sono allontanati dal letto. Incorporata direttamente nella spina di corrente si trova l'unità di conversione SwitchMode. Gli utenti possono quindi godere di un alto livello di sicurezza.

Il letto non ha componenti che trasportano corrente se non mentre si utilizza il comando. Come risultato, il consumo energetico diminuisce di più del 93%. Una ulteriore diminuzione dei costi e degli sforzi è data dal fatto che le misurazioni della perdita energetica, certificate da TÜV Rheinland, non sono più necessarie. In principio, le misurazioni della perdita energetica dovevano essere svolte ogni 2 anni per letti ortopedici ad uso commerciale. L'utilizzo del 24V System prolunga questo intervallo di tempo cosicché tali misurazioni non sono necessarie nell'arco del periodo di utilizzo stimato del letto. Il tempo di utilizzo stimato del letto è indicato nel manuale tecnico.

Anche quando il letto viene messo in funzione per la prima volta, la misurazione della perdita energetica non è necessaria, in quanto già effettuata dal produttore. Non è neanche richiesta la presenza di un tecnico elettricista, il che permette di ridurre ulteriormente i costi aggiuntivi.

VIVERE IN SICUREZZA A CASA

Vantaggi importanti

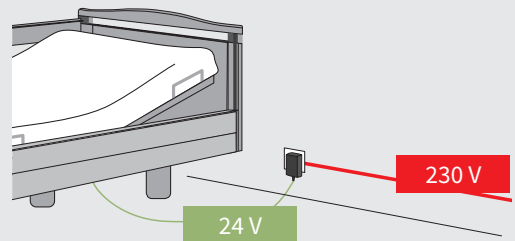

- Bassa tensione di sicurezza dal trasformatore nella presa elettrica.
- Nessun componente ad alta tensione (230V) nel letto.
- Misurazioni di perdita di corrente non necessarie dopo l'installazione e durante tutto il tempo stimato per l'utilizzo del letto.
- Per ogni letto è possibile scaricare il certificato di prova.



Stile ed eleganza: il Regia si distingue per il design senza tempo e caratteristiche tecniche senza precedenti.



Il materasso premium Sky-fit (qui senza rivestimento) si adatta perfettamente al piano letto del Regia.

Disponibile per piano letto di dimensioni:

Sky-fit

90 x 200 cm
100 x 200 cm

Comfort-fit

90 x 200 cm
100 x 200 cm


Basic-fit

90 x 200 cm
90 x 220 cm
100 x 200 cm
100 x 220 cm

Materassi

Goditi un buon riposo notturno

Concedi a te stesso o a chi ami il massimo comfort scegliendo un materasso Burmeier per il tuo Regia. I nostri materassi per letti ortopedici seguono in modo preciso ogni regolazione dello schienale e del supporto per le gambe così da consentire posture ottimali e i relativi benefici. I modelli Sky-fit e Comfort-fit sono anche materassi invertibili con un lato liscio e uno sagomato: di conseguenza, questi materassi non sono mai troppo rigidi o troppo morbidi - essi possono semplicemente essere ribaltati e offrire due differenti esperienze di appoggio.

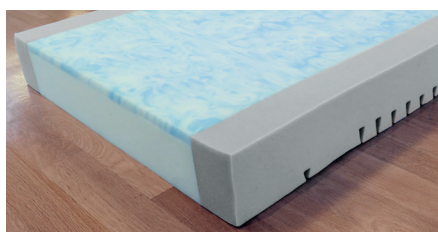

▲ Il modello Sky-fit con strato superiore di alta qualità Skytherm®.

Sky-fit – il modello premium

- Materasso a doppio strato di alta qualità con strato superiore Skytherm di 2 cm e uno strato inferiore di 12 cm di spugna.
- La sagomatura nello strato di base assicura un ottimo adattamento alla rete.
- Entrambi i lati possono essere utilizzati come superfici di appoggio.
- I margini rinforzati permettono all'utente di sedersi confortevolmente sul lato del letto.
- Il coprimaterasso rimovibile e reversibile, con uno strato in poliuretano e uno in poliestere e viscosa, è lavabile in lavatrice.
- Rigidità in compressione di 5 kPa (margini), 4 kPa (strato inferiore), 2,5 kPa (strato superiore), densità 50 kg/m³ (strato inferiore) e 40 kg/m³ (strato superiore).



▲ Il modello Comfort-fit con rinforzo ai margini.

Comfort-fit – il modello intermedio

- Materasso confortevole con un interno realizzato in schiuma di poliuretano elastica (14 cm).
- La sagomatura nello strato di base assicura un ottimo adattamento alla rete.
- Entrambi i lati possono essere utilizzati come superfici di appoggio.
- Il coprimaterasso rimovibile e reversibile, con uno strato in poliuretano e uno in poliestere e viscosa, è lavabile in lavatrice.
- Rigidità in compressione di 5 kPa (margini), 4 kPa (strato inferiore) e densità 40 kg/m³.



▲ Modello Basic-fit

Basic-fit – il modello entry-level

- Materasso con un unico strato di poliuretano (12 cm).
- Il coprimaterasso rimovibile bianco può essere lavato in lavatrice.
- Rigidità in compressione di 4.5 kPa, densità di 40 kg/m³.



▲ L'estensione di 20 cm viene inserita semplicemente nella struttura del letto. Sono disponibili anche prolunghe per il materasso.



▲ La rete comfort comprende 50 elementi molleggiati che si muovono liberamente.



▲ La lampada da lettura può essere fissata direttamente al letto o al sollevatore (TM).



▲ La luce sotto al letto favorisce l'orientamento nella stanza di notte e aumenta il livello di sicurezza.




▲ Con il supporto flessibile, il comando è sempre a portata di mano.

Accessori funzionali

Con gli accessori originali Burmeier il tuo Regia si trasforma in un letto su misura che offre il massimo comfort e protezione. La prolunga di 20 cm per il letto per esempio è raccomandata in caso di persone molto alte. Essa viene semplicemente inserita nella struttura ai piedi del letto. In questo caso, due sponde da 110 cm per lato possono coprire l'intera lunghezza del letto.

Accessori come la copertura in finta pelle per le sponde di sicurezza o la luce sotto al letto incrementano la sicurezza per l'utente. La rete comfort con i suoi elementi molleggiati, il supporto per il comando o quello per la biancheria, assicurano un maggior comfort e sollievo nella vita quotidiana.

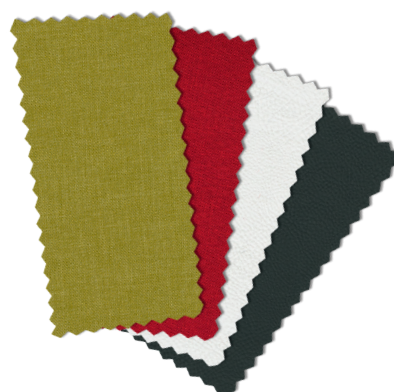

▲ **Materiali:**
Verde chiaro Tiba 6210
Rosso Tiba 3210

Ecopelle:
Bianco 1-1142-197
Antracite 1-1142-395



▲ Il supporto per la biancheria è particolarmente pratico quando si rifà il letto.



▲ Le imbottiture in finta pelle proteggono da traumi contro le sponde di sicurezza.



▲ Con una prolunga per il cavo di 1.40 m, il comando può essere utilizzato ovunque all'interno della stanza.



▲ Le rotelle di protezione evitano che il letto e i mobili della stanza si danneggino durante lo spostamento o la regolazione del letto.

Decorì¹⁾



▲ Avana ciliegia



▲ Rovere Lindberg



▲ Faggio naturale



▲ Acero reale

¹⁾ Regia partner: Faggio naturale e avana ciliegia

Testiere/pediere²⁾



▲ Testiera Primus chiusa, con barra di presa sul lato piedi (solo decoro in legno)



▲ Testiera Primus pediera Primus-Low (solo decoro in legno)



▲ Nobla (deco in legno o imbottitura, tempi di consegna più lunghi)



▲ Testiera Nobla, pediera Nobla reha (deco in legno o imbottitura)



▲ Prinzino (solo decoro in legno, tempi di consegna più lunghi)

²⁾ Regia partner: solo con le combinazioni Nobla o Nobla mala, decoro in legno o imbottitura

Dotazioni e opzioni

Caratteristiche	Regia	Regia partner
Piano letto 90 x 200 cm	✓	-
Piano letto 100 x 200 cm	0	-
Piano letto 2 x 90 x 200 cm	-	✓
Regolazione altezza	26 - 80 cm Regia movo: 28 - 83 cm	26 - 80 cm
Carico di lavoro sicuro	225 kg	2 x 225 kg
Piano letto in metallo diviso in quattro parti con schienale regolabile	✓	✓
Sollevamento elettrico della sezione gambe (21 cm)	✓	✓
Posizione anti Trendelenburg (15°)	✓	✓
Fissaggio centrale a 4 ruote, Ø 50 mm (Regia movo: Ø 100 mm)	✓	✓
Azionamento Linak 24 Volt	✓	-
Testiera e pediera Primus (solo decoro in legno)	0	-
Testiera Primus e pediera Primus-Low (solo decoro in legno, non disponibile con protezione laterale continua DSG)	0	-
Testiera e pediera Prinzino (solo decoro in legno)	0	-
Testiera e pediera Nobla (decoro in legno o imbottitura, non disponibile con DSG)	0	0
Testiera Nobla e pediera Nobla reha (decoro in legno o imbottitura, non disponibile con DSG)	0	0
Decorì Avana ciliegia, rovere Lindberg, faggio naturale, acero reale	0	Faggio naturale, avana ciliegia
Protezione laterale telescopica (TSG) con Easy Switch		
- 2 elementi 110/90 cm, pannelli ciechi laterali disponibili su richiesta	0	0
- 2 elementi 110/110 cm, pannelli ciechi laterali disponibili su richiesta	0	0
- 2 elementi 90/90 cm, pannelli ciechi laterali disponibili su richiesta	0	0
- nessuna protezione laterale, 4 pannelli ciechi laterali	0	0
- protezioni laterali imbottite	0	0
Protezione laterale continua (DSG) con Easy Click su due lati	0	-
Protezione laterale continua (DSG) con Easy Click su un lato, combinabile con TSG/pannelli ciechi laterali	0	-
Prolunga letto (ca. 20 cm)	0	0 (solo su entrambi i lati)
Alzamalati con impugnatura triangolare	0	0
Illuminazione sotto il letto	0	-
Batteria abbassamento d'emergenza	0	0
Rivestimento imbottito (disponibile per protezione laterale telescopica (TSG) e continua (DSG))	0	0 (solo TSG)
Lampada da lettura	0	0
Portabiancheria	0	-
Ruote paracolpi (2 o 4 a scelta)	0	-
Piano letto comfort	0	0
Supporto per comando	0	-
Prolunga per comando (1,40 m)	0	-
Interruttore manuale Trendelenburg (solo per case di cura)	0	-

✓ = dotazione standard
0 = opzionale

Altri strumenti di
calcolo prezzo/
configurazione
alla pagina
www.burmeier.com



Preservare il valore
Forgiare il futuro

STIEGELMEYERGROUP

Preservare il valore

Stiegelmeier nasce come azienda a conduzione familiare nel 1900 a Herford e mantiene ancora oggi questa tradizione. La nostra attività quotidiana si fonda sui valori del rispetto e della responsabilità nei confronti dei clienti, dei dipendenti e dei soci, che, unitamente alla nostra decennale esperienza, ci consentono di offrire ai nostri clienti ovunque nel mondo prodotti, soluzioni e servizi di pregio e di soddisfare le esigenze di assistenza e di salute.

Forgiare il futuro

Per restare al passo con i rapidi cambiamenti nel settore della cura e della salute, sviluppiamo autonomamente tutti i nostri prodotti. Le innovazioni e le visioni per la cura del futuro sono l'obiettivo del nostro lavoro. Siamo sempre disponibili allo scambio con i nostri clienti per supportarli miratamente nelle loro attività di tutti i giorni. Per noi, trasferire le tendenze di domani già nel presente è una tradizione di successo.

Le nostre competenze

Ospedale

Casa di cura

Cura domiciliare

Letti comfort

Mobili funzionali

Assistenza



Il gruppo Stiegelmeier è il partner internazionale per ospedali e istituti di cura e per la cura domiciliare con il marchio Burmeier. Supportiamo i nostri clienti con prodotti orientati alla prassi, soluzioni e servizi che sviluppiamo costantemente.

- Azienda a conduzione familiare dal 1900.
- Oltre 1.100 dipendenti in tutto il mondo.
- Realizzazione di tutti i prodotti chiave nei nostri stabilimenti.
- Sviluppo dei prodotti e produzione in Germania.
- Assistenza, formazione e ottimizzazione dei processi presso il cliente.
- Certificazioni internazionali ed export in oltre 60 paesi.
- Distributori in Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Polonia e Sudafrica.

I nostri marchi



STIEGELMEYER



BURMEIER



Burmeier GmbH & Co. KG

Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Una società del gruppo Stieglmeyer

STIEGELMEYERGROUP

Sede centrale / Headquarters

Deutschland / Germany

Stieglmeyer GmbH & Co. KG

Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France

Stieglmeyer SAS

16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa

Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd

The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands

Stieglmeyer BV

Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland

Stieglmeyer Oy

Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland

Stieglmeyer Sp. z o.o.

86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Trovate un referente sul nostro sito web:
Find your local partner on our website:
www.stieglmeyer.com/partner

burmeier.com