

SCHEDA TECNICA

SCHIENALE DREAMLINE SUPPORT con sistema BAC

Schienale in alluminio

Lo schienale Dreamline Support è pensato per gli utilizzatori meno attivi che richiedono complessi supporti esterni. Lo schienale è pensato per un semplice fissaggio di supporti braccioli swing away, poggiatesta, cinture, ecc.

La funzione del sistema BAC Dreamline è quella di fornire supporto e struttura asimmetrici agli schienali della serie Support.

I cuscinetti in schiuma a celle chiuse si adattano alla forma dell'utilizzatore e possono essere impilati per riprodurre il profilo perfetto del tronco dell'utilizzatore.

Il sistema BAC si inserisce nella cover dietro l'interno in schiuma, in appoggio alla scocca dello schienale. Grazie alla sua natura modulare, il sistema BAC può essere aggiunto per un miglioramento degli schienali della serie Support e può essere rimosso in qualsiasi momento.

- Scocca rettangolare in alluminio ad altezza della spalla.
- Attacchi fissi o a sgancio rapido.
- Il componente per il fissaggio dello schienale è regolabile in profondità (fino a 3" - 75 mm), altezza, larghezza (fino a 2" - 50 mm) e angolazione (fino a 60° +30° / -30°).
- I morsetti di fissaggio dello schienale possono essere montati sulla parte anteriore o posteriore delle asole dello schienale.
- Include la cover esterna traspirante ed elastica in 4 direzioni FLO2™.

Il SISTEMA BAC comprende:


- Piastra di sostegno in polipropilene.
- Cuscinetti BAC in schiuma a celle chiuse.
- Include un set di 10 cuscinetti BAC extra.
- Peso del sistema BAC = 0,65 kg (18"x18" - 46 cm x 46 cm)
- Peso massimo dell'utilizzatore = 136 kg

via Proventa, 52
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

Medimec International srl - Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato - Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 - Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

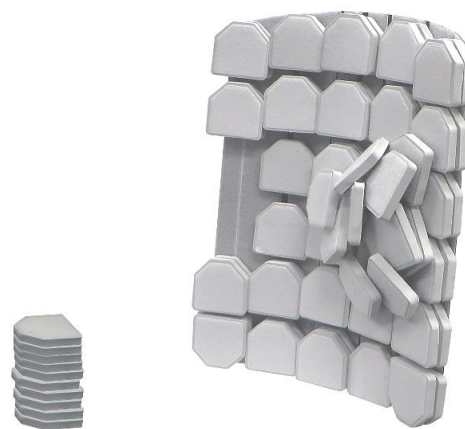

ROLAPAL

